

TELECAMERA LCD CAMERA SYRIO-2



“€urotek Image System”

- Visualizzare immagini
- Salvare immagini
- Salvare Filmati
- Archiviare su SD card




SYRIO è una fotocamera per microscopia, dotata di Display LCD integrato da (3,6"). Questa speciale camera è collegabile ad un qualsiasi microscopio biologico o stereo, mediante l'adattatore in dotazione. Si inserisce semplicemente al posto dell'oculare e in questo modo si visualizzano le immagini direttamente sul display LCD. È possibile acquisire delle immagini o brevi filmati. Agendo direttamente sulla tastiera della Digital Camera si possono modificare le varie impostazioni (risoluzione, zoom, Menu, ecc).

Permette di visualizzare l'immagine nel monitor LCD e di trasferirla su PC mediante l'apposito cavo USB; oppure vedere l'immagine direttamente nel monitor del computer agendo nel programma di acquisizione, per eventuali modifiche.

La microscope Digital Camera è dotata di uscita AV, per il collegamento ad un monitor TV esterno.

In dotazione fornita con custodia:

- Microscope Digital Camera
- Adattatore per Microscopi Biologici
- Adattatore per Microscopi Stereo
- SD Card 2GB
- Cavo USB
- Cavo AV
- Alimentatore
- CD (Driver&Software)

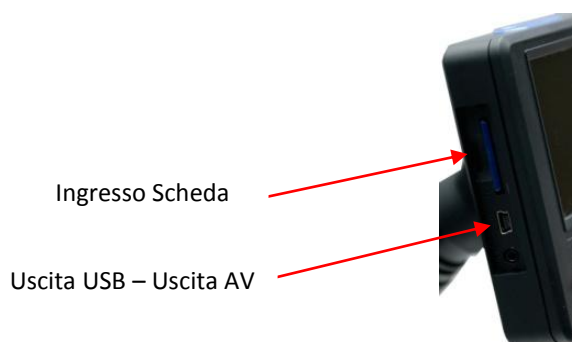

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	
Monitor LCD	3,6" TFT a colori - 320x240Pixe
Image Sensor	2.0 Mega Pixel (CMOS) interpolata a 5Mega Pixel
Risoluzione	5MP(2560x1920), 3MP(2048x1536), 2MP(1600x1200)
Ingrandimento	10x
Zoom Digitale	8x
Memoria Interna	8 M
Memoria Esterna	SD Slot
USB	2.0
Alimentazione	DC5V
Output	USB - AV
Formato Immagini	JPEG - AVI
Sistema Video	PAL o NTSC
Bilanciamento del Bianco	Manuale / Automatico

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:

- Computer con Porta USB 2.0
- Lettore CD-ROM (per installare driver & software)
- Windows 2000 / XP o Windows Vista
- Direct 9.0 (per Windows 2000)
- CPU 2.0GHz o più
- 256 MB o più
- Spazio libero su Hard DISK 1GB

La telecamera è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE).

